




**Garantía
2 años**

Autoclave 24 Litros

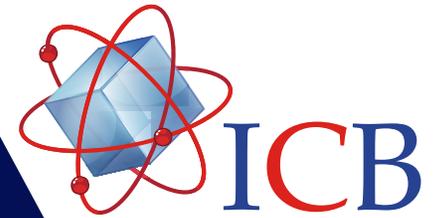

ACF100315

Descripción

El autoclave esterilizador de 24 litros es un equipo utilizado para eliminar todos los microorganismos de ropa, gomas, soluciones embotelladas, utensilios, entre otros, mediante vapor, garantizando así la asepsia.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	24 litros
Temperatura	105° a 126°C
Presión de trabajo	0.14 a 0.16 MPa
Temporizador	0 - 60 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones Internas	Ø 280x390 mm
Dimensiones Externas	410x410x630 mm
Peso	18 kg
Potencia	2 KW
Alimentación	110V 60Hz



Características

- Estructura interior y exterior de acero inoxidable.
- Perillas para el control de temperatura y tiempo.
- Manómetro para medir la presión y temperatura.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Protección contra el sobrecalentamiento y la falta de agua.
- Válvula de escape de seguridad.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Llave de drenado.

Accesorios Incluidos

- Placa tamiz de acero inoxidable
- Tambor esterilizador
- Llave de mariposa
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español