

ICB

Centrífugas SEROFUGE ICB

Centrífuga ICB Serofuge de 12 Plazas ICB

Catálogo CDY101983

Centrífuga de 12 Plazas ICB Serofuge



Características

- Usada en Hospitales, laboratorios y bancos de sangre.
- Motor sin carbones libre de mantenimiento.
- Poca vibración y ruido.
- Tapa Electrónica de Seguridad, diseño compacto y protección contra desbalanceo.
- Control y sistema amigable.
- Pantalla controlada por microprocesador.
- Cuerpo fabricado en Acero de alta calidad.
- Cámara interior fabricada en Acero Inoxidable.

Especificaciones Técnicas

Velocidad Máxima	4000 RPM
Volumen Máximo	12 tubos de 7 ml
Tiempo	0-99 minutos
Dimensiones	265 x 483 x 320 mm
Precisión de Velocidad	± 10 RPM
RCF Máxima	2000 xg
Ruido	< 55 dba
Peso	24 kg
Alimentación	AC 120v 60 Hz 2A
Empaque	Caja de Cartón


Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 

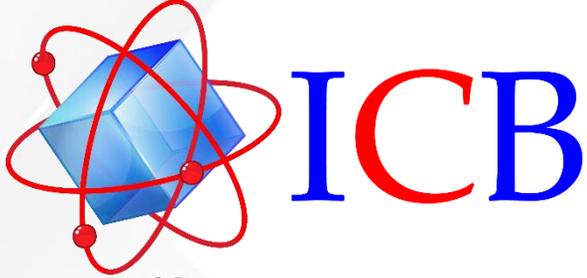

Centrífugas SEROFUGE ICB

Centrífuga ICB Serofuge de 12 Plazas ICB

Rotor Serofuge Centrífuga ICB CDY101983

Rotor	Max. RPM	Max. Capacidad	Max. RCF (xg)
Rotor Serofuge	4000 RPM	12 x 7 ml / 5 ml	2000

Usos para rotor Serofuge Centrífuga ICB CDY101983

Rotor	Max. RCF	Uso
Programación HLA para lavado de Linfocitos	2000 RPM	Separación de Linfocitos y separación de células incubadas
	1000 RPM	Extensión de hematoblastos (eliminación de trombina)
	1000 RPM	Lavado de Linfocitos

Rotor	Max. RCF	Uso
Programación Sero para lavado de eritrocitos	500 RPM	Determinación de tipo sanguíneo e imagen del eritrocito
	1000 RPM	Prueba de compatibilidad
	1000 RPM	Lavado de Eritrocitos y destilación de suero y plasma.

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 