

ICB

LI'LPET



La operación del pistón de dos pasos facilita la expulsión del sobrante en la punta (la última gota dispensada), se obtiene como resultado alta precisión y exactitud.



ISO 13485:2003



ISO 9001:2008




MINIPIPETA DE VOLÚMEN FIJO

MICROPIPETAS

LI'LPET – El pequeño Gigante

Estas Pipetas Miniatura de Volumen Fijo y de bajo costo han sido diseñadas para su uso con kits de diagnóstico.

Los valores de volumen alto Li'lpets de 200 μl , 250 μl , 500 μl y de 1000 μl se diseñaron especialmente para el trabajo de rutina de laboratorio.

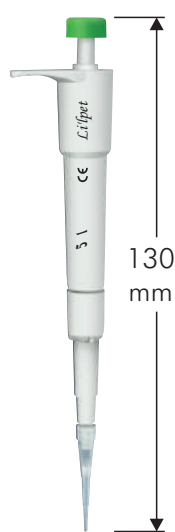

Medidas óptimas

- Las Micropipetas Li'lpet tienen 130 mm de largo por lo que son de una medida óptima y cómoda para el operador durante su trabajo de pipeteo.
- ¡Las Micropipetas Li'lpet se sujetan como una pipeta y no como una jeringa!

Totalmente Autoclavables

La Micropipeta Li'lpet es totalmente autoclavable a 121°C, 15 psi por 10-15 min.

ESPECIFICACIONES E INFORMACION PARA PEDIDOS

Miniatura de Volumen Fijo

Modelo	Vol. μl	Exact. $\pm\%$	CV $\pm\%$
MM-5	5	2.5	1.5
MM-10	10	1.2	0.8
MM-20	20	1.0	0.5
MM-25	25	1.0	0.4
MM-50	50	1.0	0.4
MM-100	100	0.8	0.3
MM-200	200	0.8	0.3
MM-250	250	0.8	0.3
MM-500	500	0.8	0.3
MM-1000	1000	0.8	0.3

Nota: La exactitud y el CV están conforme el ISO 8655-2



Exclusivo Cono para Puntas

- El cono de las Li'lpet (5 μ l, 10 μ l, 20 μ l) está diseñado para aceptar tanto las puntas estándar de 200 μ l como las puntas Ultra micro hasta 20 μ l.
- Al usar las puntas Ultra micro para volúmenes hasta 20 μ l aumenta la precisión y exactitud significativamente.



Operación del Pistón de dos Pasos

- Es una característica exclusiva de la Li'lpet que la convierte en una micro pipeta miniatura genuina.
- Esta característica también permite que la Li'lpet opere en Pipeteo Inverso y pipeteo de repetición.

Estricto Control de Calidad

- Cada pipeta pasa por un estricto Control de Calidad En cada paso de su fabricación. Durante el proceso de fabricación cada pipeta se calibra individualmente de acuerdo a los estándares ISO 8655. Se puede suministrar a solicitud una calibración por lote.

Disponible como opción OEM

- Se pueden personalizar los colores.



Se tienen disponibles varias opciones de empaque

- Empaque de Li'lpet individuales. Empaque de 10 Li'lpets.
- Empaque a granel con 25 o 100 Li'lpets.
- Se tienen disponibles varias opciones de empaque a su solicitud.

