




**Garantía  
2 años**

# Autoclave 75 Litros Semiautomática

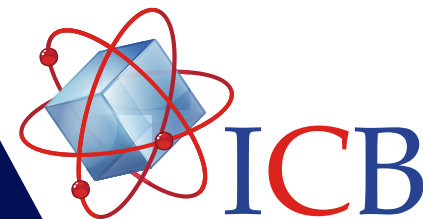

ACF100457

## Descripción

El autoclave semiautomática de 75 litros un equipo diseñado para la esterilización de materiales de laboratorio y médicos, como ropa, gomas, soluciones embotelladas y utensilios, mediante vapor a alta presión, garantizando así la asepsia.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	75 litros
Temperatura	105° a 134°C
Estabilidad	±1°C
Presión de trabajo	0.22 MPa
Temporizador	0 - 99 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones Internas	Ø 400x600 mm
Dimensiones Externas	560x560x1120 mm
Peso	80 kg
Potencia	4.5 KW
Alimentación	110V 60Hz



## Características

- Tapa tipo volante de apertura y cierre rápido.
- Estructura e interior totalmente construida en acero inoxidable SUS304.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la tapa.
- Sellado hermético de la puerta tipo autoinflable.
- Pantalla LCD de 3" para la configuración de parámetros.
- 3 Programas pre-cargados para la esterilización de objetos.
- Manómetro para medir la presión interna.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Sensor de seguridad protector contra falta de agua.
- Autoprotección contra sobret temperatura y sobrepresión.
- Descarga automática del aire frío previo a la esterilización.
- Descarga automática del vapor después de la esterilización.
- Doble válvula, de seguridad y de escape de vapor.
- Alarma sonora y apagado automático al finalizar el ciclo.

## Accesorios Incluidos

- 2 canastillas de acero inoxidable
- Tapa para canasta de acero inoxidable
- Placa tamiz de acero inoxidable
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español
- Manguera de salida de vapor