




**Garantía
2 años**

Baño María para Laboratorio de 3.3 Litros

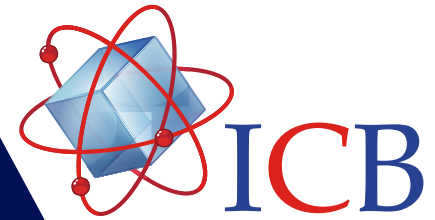

BMF100941 / 2^{da} Generación

Descripción

El Baño María de 3.3 litros es un dispositivo que calienta y mantiene una temperatura constante en muestras mediante un recipiente de agua controlado térmicamente. Es ideal para incubaciones, reacciones químicas y preparaciones de soluciones.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	3.3 Litros
Temperatura	TA+5° a 100°C
Estabilidad	±0.5°C
Uniformidad	±1°C
Temporizador	0 - 999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	160x160x130 mm
Dimensiones externas	200x210x210 mm
Peso	3 kg
Potencia	300 W
Alimentación	110V 60Hz



* medidas aproximadas

Características

- Panel digital polarizado para la configuración de parámetros.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Sensor electrónico de temperatura PT100 en el tanque.
- Alarma auditiva y visual en caso de sobrecalentamiento del agua.
- Fusible de seguridad integrado para protección de cortocircuitos.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Controlador Inteligente de temperatura para un ajuste preciso.
- Anillos circulares de PP para el control de la temperatura interna.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con esquinas curvadas.

Accesorios Incluidos

- Juego de anillos reductores con tapa
- Tapa desmontable de metal cromado.
- Rejilla para soporte de acero inoxidable.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.