




**Garantía
3 años**

Centrífuga FUGE PRO

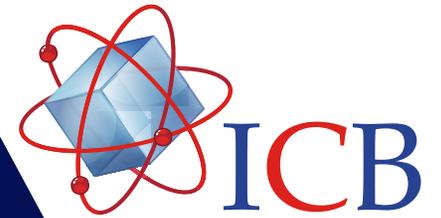

CDF110877

Descripción

La centrífuga FUGE PRO se utiliza para la separación y/o sedimentación de componentes en muestras biológicas, tales como sangre, orina, etc. Ideal para laboratorios clínicos y médicos.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	1000 - 4000 rpm
Incrementos	500 rpm
FCR Máxima	1790 xg
Temporizador	1 - 60 min
Operación	Tiempo
Ruido	<43.8 dB
Dimensiones	320x340x280 mm
Peso	4 kg
Potencia	80 W
Alimentación	110V 60Hz

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015
13485:2016



Rotor incluido:



6x15ml
1790 xg

Características

- Panel de control digital para la configuración de velocidad y tiempo.
- Fusible para protección eléctrica en caso de sobrevoltaje o cortocircuito.
- Sistema de seguridad de frenado al abrir la tapa durante su operación.
- Tapa de plástico transparente para la validación de RPM con tacómetro.
- Rotor angular de aluminio con orificios numerados.
- Fácil visualización del funcionamiento del rotor gracias a su tapa.
- Apertura manual de la tapa.
- Base estable con ventosas.

Accesorios Incluidos

- Rotor Angular de 6x15ml.
- Fusible
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.