




**Garantía
2 años**

Agitador Magnético Digital

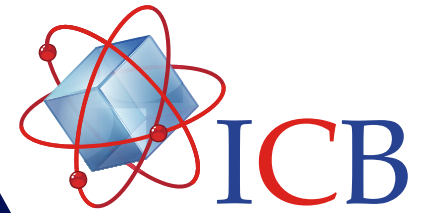

AMF100403

Descripción


El Agitador Magnético Digital, es un equipo diseñado para mezclar y calentar soluciones de forma simultánea por medio de su panel de control con ajuste de temperatura, velocidad y tiempo. Es ideal para la preparación de soluciones, titulaciones, formulación de medicamentos, cultivos celulares, etc., en los laboratorios de microbiología, química, biología, farmacéuticos, materiales, controles de calidad, entre otros.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Velocidad	200 a 2000	rpm
Temperatura Máx.	350	°C
Volumen Máx.	5000	mL
Temporizador	0 a 9999	min
Operación	Continua	-
Dimensiones	320x190x125	mm
Plataforma	190x190	mm
Peso	5	kg
Potencia	0.6	kW
Alimentación	110/60	V/Hz

CE
Conformidad Europea

ISO
9001:2015

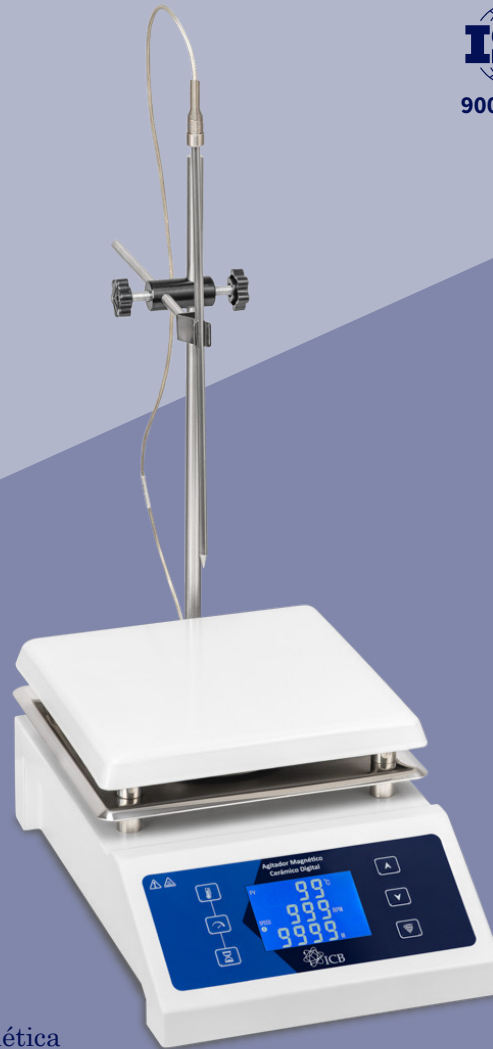

Barra magnética



Características

- Versátil para realizar calentamiento y agitación simultánea o independiente.
- Panel de control para ajuste preciso de temperatura, velocidad y tiempo.
- Calentamiento proporcionado mediante resistencia eléctrica.
- Función de tiempo ajustable bajo requisitos del proceso.
- Plataforma recubierta de cerámica para mayor resistencia a productos químicos.
- Superficie fácil de limpiar, lo que facilita la limpieza rápida posterior a su uso.
- Soporte de acero inoxidable para colocar termómetros, sensores o electrodos.
- Sensor de temperatura PT100 externo para control de temperatura.
- Calentamiento desde temperatura ambiente hasta un máximo de 350 °C.
- Con fusible de seguridad para proteger al usuario, equipo e instalaciones.
- La capacidad máxima de agitación puede alcanzar hasta 5000 mL.
- Con almohadillas antideslizantes para una acción de agitación más estable.

Accesorios Incluidos

- Soporte para termómetros, sensores, etc.
 - Sensor de temperatura PT100.
 - Barra magnética para agitación.
 - Fusible.
 - Cable de alimentación (110V 60Hz)
- ¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!