




**Garantía
2 años**

Autoclave Digital de 24 Litros

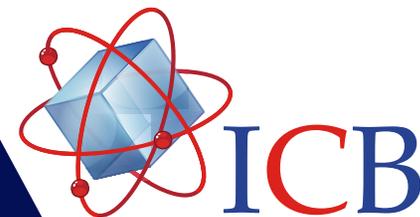

ACF111327 / 2da. Generación

Descripción

El autoclave digital de 24 litros un equipo diseñado para la esterilización de materiales de laboratorio y médicos, como ropa, gomas, soluciones embotelladas y utensilios, mediante vapor a alta presión, garantizando así la asepsia.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	24 litros
Temperatura	105° a 126°C
Estabilidad	±1°C
Presión de trabajo	0.14 a 0.16 MPa
Temporizador	0 - 99 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones Internas	Ø 280x390 mm
Dimensiones Externas	Ø 410x750 mm
Peso	14 kg
Potencia	2 KW
Alimentación	110V 60Hz



Características

- Estructura interior y exterior de acero inoxidable SUS304.
- Tapa tipo perilla de apertura y cierre rápido.
- Panel digital para el control preciso de temperatura y tiempo.
- Manómetro integrado para medir la presión y temperatura interna.
- Sistema de autoprotección contra sobretemperatura.
- Sensor digital de temperatura interna.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Doble válvula, de seguridad y de escape de vapor.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo de esterilización.
- Llave de drenado.

Accesorios Incluidos

- Placa tamiz de acero inoxidable
- Tambor esterilizador
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español