




**Garantía  
2 años**

# Autoclave Semiautomática 100 litros

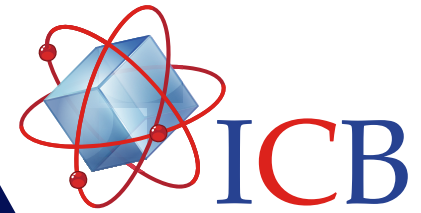

ACF100465

## Descripción

El autoclave semiautomática de 100 litros, es un equipo diseñado con alta capacidad para la esterilización de materiales de laboratorio y médicos mediante calor húmedo, lo que permite la eliminación de todas las formas de vida microbianas, garantizando así, la asepsia y el control de calidad de instrumental, objetos o textiles.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	100	L
Temperatura	105 a 134	°C
Estabilidad	±1	°C
Presión	0.22	MPa
Temporizador	0 - 99	min
Operación	Tiempo	-
Dimensiones internas	Ø 440x650	mm
Dimensiones externas	540x560x1250	mm
Peso	85	kg
Potencia	4.5	kW
Alimentación	110/60	V/Hz



**ISO**  
9001:2015

## Características

- Pantalla LCD de 3" para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- Elimina el aire para asegurar una penetración adecuada del vapor.
- Sensado en tiempo real de temperatura y presión.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- 3 programas precargados para la esterilización de objetos o textiles.
- Alarma sonora y apagado automático al finalizar el ciclo.
- Doble válvula de seguridad y de escape de vapor.
- Descarga automática del vapor después de la esterilización.
- Protección interna contra el sobrecalentamiento y sobrepresión.
- Interior de acero inoxidable SUS304, resistente a la corrosión.
- Excelente control de la presión y temperatura para sus procesos.

## Accesorios Incluidos

- 2 Canastillas de acero inoxidable.
- Tapa para canasta de acero inoxidable.
- Placa tamiz de acero inoxidable.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!