




**Garantía  
2 años**

# Mini Cabina de Bioseguridad Clase I

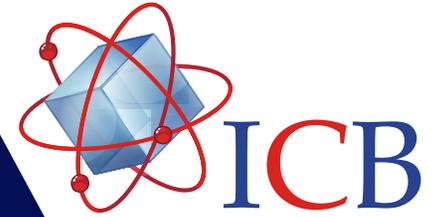

## Descripción

La Mini Cabina de Bioseguridad Clase I es un equipo diseñado para trabajar con materiales de riesgo bajo y/o moderado que generan aerosoles, vapores o polvos, proporcionando protección tanto al personal como al entorno.

CBF110276



**9001:2015  
13485:2016**



## Especificaciones Técnicas

Filtro HEPA	99.995% a 0.3 um
Velocidad	0.2 - 0.6 m/s
Flujo de aire	Vertical
Luz Ultravioleta	253.7 nm
Altura de la puerta	310 mm
Dimensiones internas	480x340x370 mm
Dimensiones externas	550x460x700 mm
Peso	36kg
Potencia	110 W
Alimentación	110V 60Hz

## Características

- Protección al operador y al ambiente, mas no a la muestra.
- Pantalla LCD a color de 3" para la configuración de parámetros.
- Superficie de trabajo de acero inoxidable SUS304.
- Ventanas frontal y laterales de cristal templado anti-UV de 5mm.
- Enchufe disponible dentro del área de trabajo.
- Luz LED blanca para iluminar el área de trabajo.
- Esterilización del área de trabajo mediante luz UV.
- Pre-filtro de fibra de poliuretano lavable y anti-UV.
- Sensor de temperatura en el interior de la cámara.
- Indicadores visuales de la vida útil del filtro HEPA y luz UV.

## Accesorios Incluidos

- Control remoto
- Lámparas UV y LED
- Juego de llaves
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español
- Fusible