




**Garantía
3 años**

Centrífuga FUGE II

CDY101751

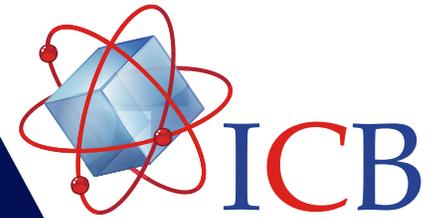

Descripción

La centrífuga FUGE II se utiliza para la separación y/o sedimentación de componentes en muestras biológicas, tales como sangre, orina, etc. Ideal para laboratorios clínicos, médicos e investigación científica.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 - 5000 rpm
FCR Máxima	3460 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<45dB
Dimensiones	450x410x340 mm
Peso	18 kg
Potencia	200 W
Alimentación	110V 60Hz



Rotor a elegir:

Angulares

Oscilante

6 x 50 ml

24 x 10 ml

6 x 10 ml



4000 rpm
2100 xg

4000 rpm
2200 xg

5000 rpm
3460 xg

Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LED de 7 segmentos para controlar la velocidad y el tiempo.
- Ventana superior para la medición de RPM con tacómetro.
- Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Sistema de seguridad de apertura y cierre de la tapa.
- Protección contra desbalanceo y sobretensión.
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Cámara interior fabricada en acero inoxidable.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Cuerpo de acero de alta calidad.

Accesorios Incluidos

- **1 Rotor a elegir.**
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.