




**Garantía  
2 años**

# Centrífuga FUGE PRO

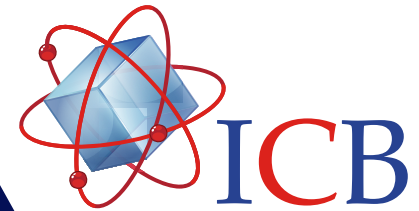

CDF110877

## Descripción

La Centrífuga FUGE PRO, es una centrífuga digital de ángulo fijo con seguridad avanzada. Es utilizada para la separación de rápida y eficiente de partículas y/o sedimentación de componentes de muestras biológicas, tales como sangre, orina, etc. Ideal para laboratorios clínicos médicos, biología molecular, bioquímica, investigación y en aplicaciones a nivel industrial, como lo es la industria alimentaria.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Velocidad	1000 - 4000	rpm
Incrementos	500	rpm
FCR Máxima	1790	xg
Temporizador	1 - 59	min
Operación	Tiempo	-
Ruido	<43.8	dB
Dimensiones	320x340x280	mm
Peso	4	kg
Potencia	0.08	kW
Alimentación	110/60	V/Hz



Conformidad  
Europea



9001:2015



## Características

- Pantalla LED para ajuste y visualización del velocidad y tiempo de operación.
- Ajuste digital de la velocidad hasta un máximo de 4000rpm.
- Rotor de ángulo fijo con capacidad para 6 tubos de 15mL (6x15mL).
- Posiciones enumeradas en el rotor para un mejor control de las muestras.
- Sistema de seguridad de frenado al abrir la tapa durante su operación.
- Tapa de policarbonato transparente para visualización y control del rotor.
- Interruptor de seguridad que evita la centrifugación si la tapa está abierta.
- Motor de suspensión elástica para asegurar una operación suave.
- Apertura manual de la tapa que facilita la manipulación por el operador.
- Base estable con ventosas para una buena fijación a la superficie de trabajo.
- Con fusible de seguridad para proteger al usuario, equipo e instalaciones.
- Bajo nivel de ruido, lo que se convierte en un equipo seguro y confiable de operar.

## Accesorios Incluidos

- Rotor Angular de 6x15mL.
- Fusible.
- Cable de alimentación (110V60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!