




**Garantía
3 años**

Centrífuga Tarjetas de Gel ICB

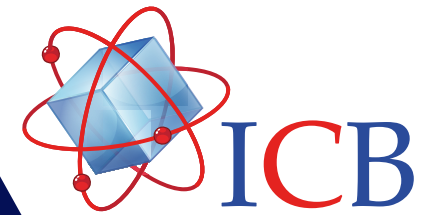

CDY102522

Descripción

La Centrífuga de Tarjetas de Gel ICB, es un equipo de baja velocidad diseñado para una capacidad máxima de 24 Tarjetas de Gel, con una velocidad máxima de 3000 rpm. Cuenta con pantalla LCD para la configuración y visualización de parámetros de velocidad, tiempo y fuerza centrífuga FCR, posee protección contra exceso de velocidad y desequilibrio, con funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y una excelente eficiencia de separación. Es una herramienta ideal para pruebas de tipo sanguíneo, pruebas cruzadas ABO, inspecciones de rutina de sangre, gel de micro columna, inmunoensayos y otras pruebas de bancos de sangre, hospitales y laboratorios de investigación.


Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Velocidad Máx.	3000	rpm
FCR Máxima	1190	xg
Capacidad Máxima	24 tarjetas	-
Temporizador	0 a 99:59	min:seg
Exactitud de Velocidad	±20	rpm
Operación	Tiempo	-
Ruido	< 53.7	dB(A)
Dimensiones	480x360x250	mm
Peso	16.46	kg
Potencia	100	W
Alimentación	120 ±10%/60 0.83 ±10%	V/Hz A

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015
13485:2016

Registrado y
Listado ante la
US FDA

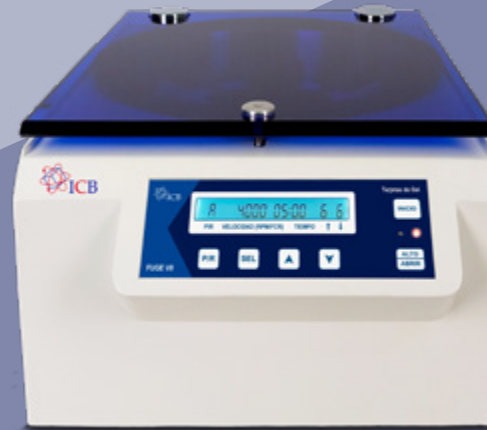

Elige un rotor oscilante:
24 Tarjetas



3000 rpm
1190 xg

Características

- Pantalla LCD para la configuración de parámetros de velocidad, tiempo y FCR.
- Cuenta con capacidad máxima de 24 tarjetas de gel.
- Ajuste digital de la velocidad hasta un máximo de 3000 rpm.
- Bloqueo eléctrico de la tapa para evitar que se abra durante el funcionamiento.
- Protección para el usuario contra exceso de velocidad y desequilibrio.
- Cuenta con 10 Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Puede almacenar los programas con los parámetros de su operación de rutina.
- Motor sin escobetillas de carbón, libre de mantenimiento.
- Cuerpo de acero de alta calidad y cámara interior de acero inoxidable integrada.
- Su diseño avanzado y control es intuitivos, garantizan una eficiente.
- Selección del programa de centrifugación que necesite pulsando solo un botón.
- Funcionamiento con bajo nivel de ruido y mínima vibración.

Accesorios Incluidos

- Rotor para 24 tarjetas de gel.
- Cable de alimentación (120V ±10%/60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!