




**Garantía
3 años**

Centrífuga Hematocrito

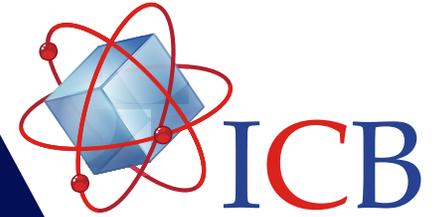

Descripción

La Centrífuga FUGE XII es un equipo de laboratorio que, mediante la rotación a alta velocidad, separa los componentes de la sangre en tubos capilares para determinar el porcentaje de hematocrito.

FUGE XII / CDY101797



Rotor Incluido:



24 tubos capilares

Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 - 12,000 rpm
FCR Máxima	15,800 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<55dB
Dimensiones	360x275x206 mm
Peso	14.5 kg
Potencia	200 W
Alimentación	110V 60Hz

Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LCD de 4" para la configuración de parámetros.
- Ventana superior para la validación de RPM con tacómetro.
- 10 Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- 12 Memorias disponibles para guardar la configuración.
- Sistema de seguridad de apertura y cierre de la tapa.
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Cámara interior de acero inoxidable SUS304.
- Estructura de acero de 3 capas.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Protección contra desbalanceo.

Accesorios Incluidos

- 1 Rotor.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.