




**Garantía  
2 años**

# Horno de Secado de Convección Natural 45 Litros

HSF102963

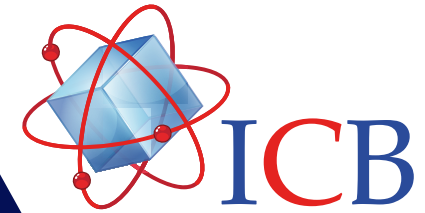

## Descripción

El Horno de Secado de Convección Natural de 45 litros, es un equipo que proporciona un control preciso de temperatura y un ambiente uniforme mediante su sistema de convección natural, facilitando de forma segura, el proceso de secado, calentamiento, esterilización de materiales sensibles o delicados. Ideal para laboratorios de química, microbiología, investigación farmacéutica, alimentos, biología molecular, universidades, controles de calidad, universidades, control de calidad, entre otros.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	45	L
Temperatura	TA +10 a 300	°C
Resolución	0.1	°C
Estabilidad	±1	°C
Uniformidad	±3.5	%
Temporizador	0-9999	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones Internas	350x350x350	mm
Dimensiones Externas	500x550x735	mm
Peso	37	kg
Potencia	1.2	kW
Alimentación	120 ±10%/60 10 ±10%	V/Hz A

**CE**  
Conformidad  
Europea

**ISO**  
9001:2015  
13485:2016



## Características

- Panel digital LED a color para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- Sistema de Convección Natural para un ambiente suave y delicado.
- Configuración de temperatura y tiempo de manera sencilla.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Opción de programación de ciclos de trabajo en el panel de control.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sensado en tiempo real de temperatura promedio de sensor PT100.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Interior de acero inoxidable SUS304, resistente a la corrosión.
- Puerta de acero con aislante térmico y ventana de cristal templado.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables.

## Accesorios Incluidos

- 2 Rejillas removibles y ajustables.
- Cable de alimentación (120 ±10%V/60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!