




**Garantía
2 años**

Horno de Secado 18 litros

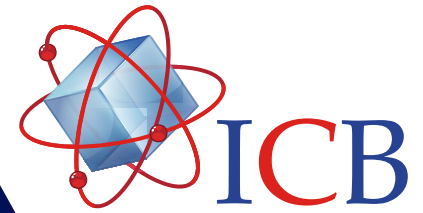

HSF102955

Descripción

El Horno de Secado de 18 litros, es un equipo que proporciona un control consistente de temperatura mediante un sistema de convección natural, ideal para aplicaciones que requieran una circulación de aire cíclico suave y sin perturbación, como en pruebas de envejecimiento, acondicionamiento de muestras, secado y esterilización de material por medio de calor seco.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	18	L
Temperatura	TA+10°C a 300	°C
Estabilidad	±1	°C
Uniformidad	±3.5	%
Temporizador	0 - 9999	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones internas	260x260x260	mm
Dimensiones externas	380x455x568	mm
Peso	15	kg
Potencia	0.6	kW
Alimentación	110/60	V/Hz

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



2 rejillas ajustables 6 niveles:



Características

- Pantalla LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- Convección natural que favorece aplicaciones delicadas de secado.
- Configuración de temperatura y tiempo de manera sencilla.
- Opción de programación de ciclos de trabajo en el panel de control.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sensado en tiempo real de temperatura por medio de PT100.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Interior de acero inoxidable SUS304 acabado espejo, resistente a la corrosión.
- Puerta de acero con aislante térmico y ventana de cristal templado.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables.
- Orificio de Ø35mm para la inserción de sondas de monitoreo.

Accesorios Incluidos

- 2 Rejillas removibles y ajustables.
- Cable de alimentación (110V /60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!