




**Garantía
2 años**

Horno de Secado 45 litros

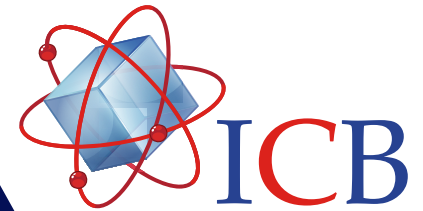

HSF110742

Descripción

El Horno de Secado de 45 litros, es un equipo que proporciona un control preciso de temperatura y un ambiente uniforme mediante su sistema de convección forzada accionado manualmente, facilitando de forma segura, el proceso de secado, calentamiento, esterilización de materiales o pruebas de envejecimiento de muestras por medio de calor seco.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	45	L
Temperatura	TA+10°C a 300	°C
Estabilidad	±1	°C
Uniformidad	±2.5	%
Temporizador	0 - 9999	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones internas	350x350x350	mm
Dimensiones externas	490x540x730	mm
Peso	37	kg
Potencia	1.2	kW
Alimentación	110/60	V/Hz

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



Características

- Panel digital LED a color para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- Sistema de Convección Forzada que proporciona mayor efectividad.
- Configuración de temperatura y tiempo de manera sencilla.
- Circulación de aire horizontal de alta eficiencia y uniformidad.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Opción de programación de ciclos de trabajo en el panel de control.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sensado en tiempo real de temperatura por medio de PT100.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Interior de acero inoxidable SUS304 acabado espejo, resistente a la corrosión.
- Puerta de acero con aislante térmico y ventana de cristal templado.

Accesorios Incluidos

- 2 Rejillas removibles y ajustables.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!