




**Garantía
2 años**

Incubadora 18 litros

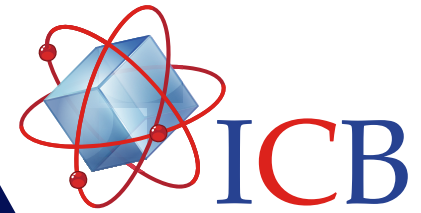

IDF109707

Descripción

La incubadora de 18 litros, es un equipo con gran estabilidad que proporciona un microambiente controlado a través de su sistema de calefacción y convección natural uniforme y homogéneo, que permiten el proceso de crecimiento de microorganismos, pruebas de fermentación, mantenimiento de la integridad de organismos para la investigación, muestras sensibles, entre otras aplicaciones.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	18	L
Temperatura	TA+5 a 65	°C
Estabilidad	±0.5	°C
Uniformidad	±2	%
Temporizador	0 - 9999	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones internas	260x260x260	mm
Dimensiones externas	380x455x568	mm
Peso	15	kg
Potencia	0.18	kW
Alimentación	110/60	V/Hz

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



2 rejillas ajustables 6 niveles:



Características

- Pantalla LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- La Convección Natural favorece un ambiente para muestras sensibles.
- Configuración de temperatura y tiempo de manera sencilla.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sensado en tiempo real de temperatura por medio de PT100.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Interior de acero inoxidable SUS304 acabado espejo, resistente a la corrosión.
- Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento.

Accesorios Incluidos

- 2 Rejillas removibles y ajustables.
- Cable de alimentación (110V /60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!