




**Garantía
2 años**

Incubadora 18 litros

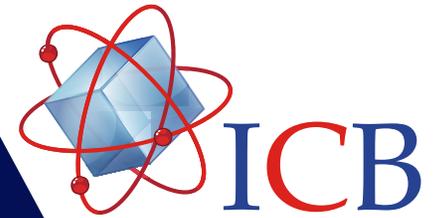

IDF109707

Descripción

La incubadora de 18 litros para laboratorio es un equipo que proporciona un ambiente controlado para el cultivo de microorganismos y células, utilizando convección natural para calentar el aire y mantener una temperatura constante y homogénea.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	18 litros
Temperatura	TA+5°C a 65°C
Estabilidad	±0.5°C
Temporizador	0 - 9999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	260x260x260 mm
Dimensiones externas	380x455x568 mm
Peso	22 kg
Potencia	180 W
Alimentación	110V 60Hz



2 rejillas ajustables 6 niveles:



Características

- Pantalla LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros.
- Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables en 6 niveles.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Sensor de temperatura interno.
- Convección natural.

Accesorios Incluidos

- 2 rejillas planas removibles y ajustables
- Fusible
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español