




**Garantía  
2 años**

# Incubadora 45 litros

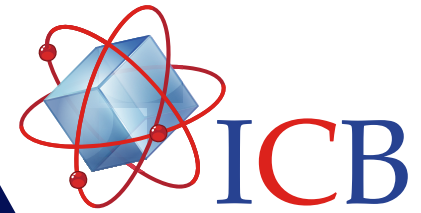

IDF109731

## Descripción

La incubadora de 45 litros, es un equipo con gran estabilidad que proporciona un microambiente controlado, por medio de su sistema de calefacción y convección forzada uniforme y homogénea que permiten el proceso de crecimiento de microorganismos, pruebas de fermentación, mantenimiento de la integridad de organismos para la investigación, muestras sensibles, entre otras aplicaciones.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	45	L
Temperatura	TA+5 a 120	°C
Estabilidad	±1	°C
Uniformidad	±1	°C
Temporizador	0 - 9999	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones internas	350x350x350	mm
Dimensiones externas	500x550x735	mm
Peso	37	kg
Potencia	0.5	kW
Alimentación	110/60	V/Hz

**CE**  
Conformidad  
Europea

**ISO**  
9001:2015



2 rejillas ajustables:



## Características

- Pantalla LED a color para la configuración de parámetros.
- Sistema PID de temperatura que ofrece gran precisión y estabilidad.
- Sistema de Convección forzada que proporciona mayor efectividad.
- Configuración de temperatura y tiempo de manera sencilla.
- Ventilador con 3 niveles de velocidad para el suministro de aire caliente.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sensado en tiempo real de temperatura por medio de PT100.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Interior de acero inoxidable SUS304 acabado espejo, resistente a la corrosión.
- Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables.

## Accesorios Incluidos

- 2 Rejillas removibles y ajustables.
- Cable de alimentación (110V /60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!