




**Garantía  
2 años**

# Limpiador Ultrasónico 10 litros

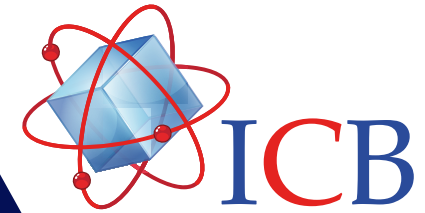

LUF112884

## Descripción

El Limpiador Ultrasónico de 10 litros, es un equipo de alta calidad diseñado para remover suciedad difícil mediante Cavitación Ultrasónica a 40 kHz. Cuenta con Pantalla digital LCD para controlar Tiempo y Temperatura de manera fácil y sencilla, temporizador ajustable para programar ciclos de limpieza eficientes. Es un equipo ideal para limpiar instrumental médico, joyería, cristalería de laboratorio, lentes, herramientas, componentes metálicos, etc., garantizando una limpieza profunda en zonas inaccesibles.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	10	L
Temperatura	TA a 80	°C
Temporizador	0 a 30	min
Operación	Continua/Tiempo	-
Dimensiones internas	300x240x150	mm
Dimensiones externas	325x265x280	mm
Peso	7.3	kg
Potencia ultrasónica	240	W
Potencia de calefacción	450	W
Alimentación	120 ±10%/60 5.75 ±10%	V/Hz A

**CE**  
Conformidad  
Europea

**ISO**  
9001:2015  
13485:2016



## Características

- Panel digital LCD para el control preciso del tiempo y temperatura.
- Remueve suciedad difícil mediante ondas sonoras de alta frecuencia.
- Temporizador ajustable de 0 a 30 minutos para ciclos de limpieza eficientes.
- Temperatura ajustable de TA hasta 80°C para una mayor efectividad de limpieza.
- Diseñado en acero inoxidable de alta calidad, resistente al desgaste y duradero.
- Tapa con ajuste preciso para evitar que el calor se disipe y evitar el ruido.
- Cesta de limpieza de acero inoxidable para reducir la fricción (opcional).
- Bases de goma antideslizantes lo mantienen estable durante la operación.
- Válvula de drenaje que permite vaciar de forma fácil y segura el líquido sucio.
- Equipo compacto en comparación con equipos industriales de gran capacidad.
- Mantiene instrumentos de trabajo en condiciones óptimas de higiene.
- Reduce el tiempo de trabajo en comparación con la limpieza manual.
- Ideal para la limpieza profunda de objetos delicados o de precisión.

## Accesorios Incluidos

- Cesta de limpieza de acero inoxidable.
- Cable de alimentación (120V ±10%/60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!