




**Garantía
2 años**

Limpiador Ultrasónico 6.8 litros

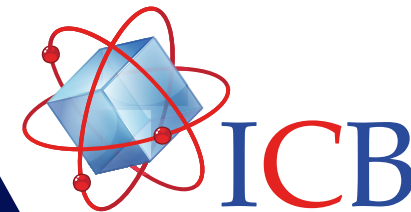

LUF112876

Descripción

El Limpiador Ultrasónico 6.8 litros, es un equipo profesional diseñado para remover suciedad difícil mediante Cavitación Ultrasónica a 39 ± 1.5 kHz. Cuenta con Pantalla digital LCD para controlar la Temperatura, Tiempo y Potencia de la limpieza ultrasónica de manera fácil y sencilla. Su carcasa y su cubierta interior, están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad. Es un equipo ideal para limpiar instrumental médico, joyería, cristalería de laboratorio, lentes, herramientas, componentes metálicos, piezas pequeñas, etc.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Volumen	6.8	L
Temperatura Máxima	80	°C
Temporizador	10s a 30min	s-min
Frecuencia Ultrasónica	39 ± 1.5	kHz
Operación	Tiempo	-
Dimensiones internas	300x150x150	mm
Dimensiones externas	367x176x292	mm
Peso	6.2	kg
Potencia ultrasónica	180	W
Potencia de calefacción	200	W
Alimentación	$120 \pm 10\%/60$ $3.16 \pm 10\%$	V/Hz A

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015
14001:2015
13485:2016
45001:2018



Características

- Panel digital LCD para el control preciso de temperatura, tiempo y potencia.
- Capacidad de volumen de 6.8L para una limpieza adecuada de sus procesos.
- Temporizador ajustable de 10s a 30min para ciclos de limpieza eficientes.
- Temperatura ajustable de 20°C a 80°C para una mayor efectividad de limpieza.
- Función de ajuste de potencia para diferentes necesidades de limpieza.
- Carcasa y tapa en acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión.
- Cesta de limpieza de acero inoxidable para reducir la fricción.
- Tapa con ajuste preciso para evitar que el calor se disipe y evitar el ruido.
- Elimina rápidamente el aire del agua con un solo botón para una mejor limpieza.
- Válvula de drenaje que permite vaciar de forma fácil y segura el líquido sucio.
- Generador ultrasónico con microcontrolador de alta potencia.
- Remueve suciedad difícil mediante ondas sonoras de alta frecuencia.

Accesorios Incluidos

- Cesta de limpieza de acero inoxidable.
- Cable de alimentación (120V $\pm 10\%$ /60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!