




**Garantía
5 años**

Microscopio Estereoscópico PRISMA 6745

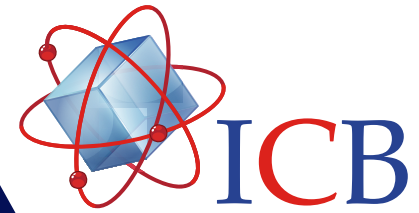

MEP112644

Descripción

El Microscopio Estereoscópico Prisma 6745, es un instrumento óptico con cabezal Binocular inclinado a 45° y giratorio a 360° para observaciones desde distintos ángulos. Cuenta con objetivos de zoom continuo para una ampliación variable y fluida, sin perder el enfoque, imagen tridimensional (3D) nítida y vertical en un amplio campo de visión (zoom), oculares de campo amplio que facilitan la observación cómoda y detallada. Es ideal para la inspección industrial y electrónica, joyería, investigación biológica, investigación forense, educación, medicina, ontología, entre otras.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Cabezal	Binocular	-
Ocular	WF10X/ø22	mm
Objetivos zoom continuo	0.67X, 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5X	-
Aumento	6.7X a 45X	-
Relación de ampliación	1:6.7	-
Platina (plato)	Blanco y Negro	-
Distancia de Trabajo	105	mm
Iluminación	Natural	-
Alimentación	110/60	V/Hz



Conformidad
Europea



9001:2015



Características

- Cabezal Binocular inclinado a 45° y giratorio a 360° para observar desde distintos ángulos.
- Imagen tridimensional (3D) nítida y vertical en un amplio campo de visión (zoom).
- Objetivos de zoom continuo para una ampliación variable y fluida, sin perder el enfoque.
- Oculares de campo amplio que facilitan la observación cómoda y detallada.
- Distancia de trabajo estándar de 105mm, permite manipular muestras cómodamente.
- Distancia interpupilar entre 55-75 mm, se ajusta a una distancia única entre las pupilas.
- Diseñado ergonómico para un uso prolongado con comodidad para el usuario.
- Iluminación natural para observar muestras opacas y traslúcidas en 3D.
- Platina (plato) reversible blanco y negro, le permite mejorar el contraste de la muestra.
- Ajuste interpupilar que le permite adaptar el microscopio a la visión del usuario.
- Acepta lentes auxiliares para modificar la distancia de trabajo o el rango de aumento de trabajo.
- Instrumento para la inspección industrial, educativa y la investigación biológica.

Accesorios Incluidos

- Juego de llaves Allen.
- Funda.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!