




**Garantía
5 años**

Microscopio Prisma 104

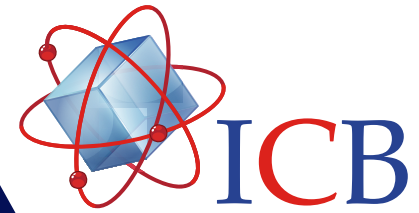

MBP103831

Descripción

El Microscopio Prisma 104, es un instrumento óptico con cabezal Binocular Siedentopf rotatable a 360° para un enfoque de alta calidad, adaptable a cabezales monoculares, binoculares y trinoculares a 30°. Cuenta con revólver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra, condensador ABBE N.A. = 1.25 y lámpara LED con brillo ajustable. Es un instrumento esencial para exámenes, demostraciones educativas, bacteriología y citos copia en universidades, centros médicos, institutos de investigación y departamentos de silvicultura y agricultura, entre otros.

Especificaciones Técnicas

| Parámetro | Valor/Dato | Unidades |
|-----------------------|--|----------|
| Cabezal | Binocular | - |
| Ocular | WF10X/ø18 | mm |
| Objetivos acromáticos | 4X, 10X, 40X(S) y 100X(S, Aceite) | - |
| Platina | Medidas: 125x115 Movimiento: X-Y 75x30 | mm |
| Revólver | Cuádruple | - |
| Enfoque | Rango: 20 | mm |
| Condensador | ABBE N.A.= 1.25 | - |
| Iluminación | LED 3W Brillo ajustable | W |
| Alimentación | 110/60 | V/Hz |

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



Características

- Cabezal Binocular Siedentopf rotatable 360° para un enfoque de alta calidad.
- Se adapta a cabezales monoculares, binoculares o trinoculares inclinados a 30°.
- Objetivos acromáticos y oculares de campo amplio que proporcionan imágenes claras.
- Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope de seguridad.
- Revólver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra.
- Moderno brazo en arco para una mejor visualización, ergonomía y comodidad.
- Platina Mecánica de doble capa, con vernier y pinza para una operación fácil.
- Objetivos con anillos de color para su fácil identificación durante su operación.
- Iluminación LED 3W con brillo ajustable, que garantiza una luz eficiente y prolongada.
- Condensador ABBE N.A. = 1.25 con diafragma de iris para una observación detallada.
- Base robusta, diseñado para uso prolongado para distintas áreas de aplicación.
- Es un equipo ideal para demostraciones educativas, laboratorios, centros médicos, etc.

Accesorios Incluidos

- Muestra de aceite de inmersión.
- Juego de llaves Allen.
- Funda.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!