




**Garantía
5 años**

Microscopio Prisma 208-LCD

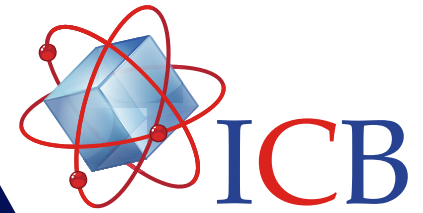

MBP104134

Descripción

El Microscopio Prisma 208-LCD, es un instrumento óptico con cabezal Trinocular Siedentopf para un enfoque de alta calidad, adaptable a cabezales binoculares y trinoculares, inclinados a 30°, Pantalla LCD para visualización en tiempo real y de alta definición. Cuenta con objetivos planos infinitos de alta calidad, revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra, condensador ABBE N.A.=1.25 y lámpara LED con brillo ajustable. Es un instrumento esencial para exámenes, demostraciones educativas, bacteriología y citoscopia en universidades, centros médicos, institutos de investigación y departamentos de silvicultura y agricultura, entre otros.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Cabezal	Trinocular	-
Ocular	WF10X/ø22	mm
Objetivos de Plano Infinito	4X, 10X, 40X(S) y 100X(S, Aceite)	-
Platina	Medidas: 175x145 Movimiento: X-Y 76x50	mm
Revolver	Cuádruple	-
Enfoque	Rango: 25	mm
Condensador	ABBE N.A.= 1.25	-
Iluminación	LED 5W Brillo ajustable	W
Alimentación	110/60	V/Hz

CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



Características

- Cabezal Trinocular Siedentopf inclinado a 30° para un enfoque de alta calidad.
- Se adapta a cabezales binoculares o trinoculares inclinados a 30°.
- Objetivos de plano infinito y oculares de campo amplio.
- Pantalla LCD táctil TFT para una visualización en tiempo real y de alta definición.
- Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope de seguridad.
- Revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra.
- Moderno brazo en arco para una mejor visualización, ergonomía y comodidad.
- Platina Mecánica de doble capa, con vernier y pinza para una operación fácil.
- Objetivos con anillos de color para su fácil identificación durante su operación.
- Iluminación Koehler LED 5W con brillo ajustable, luz eficiente y prolongada.
- Condensador ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris para una observación detallada.
- Base robusta, diseñado para uso prolongado para distintas áreas de aplicación.

Accesorios Incluidos

- Muestra de aceite de inmersión.
 - Juego de llaves Allen.
 - Funda.
 - Cable de alimentación (110V 60Hz).
- ¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!