




**Garantía  
5 años**

# Microscopio Prisma 208-T

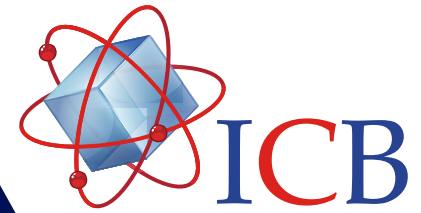

MTP104126

## Descripción

El Microscopio Prisma 208-T, es un instrumento óptico con cabezal Trinocular Siedentopf para un enfoque de alta calidad, adaptable a cabezales binoculares y trinoculares, inclinados a 30° y puede adaptarse una Pantalla LCD de alta definición. Cuenta con objetivos planos infinitos de alta calidad, revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra, condensador ABBE N.A.=1.25 y lámpara LED con brillo ajustable. Es un instrumento esencial para exámenes, demostraciones educativas, bacteriología y citoscopia en universidades, centros médicos, institutos de investigación y departamentos de silvicultura y agricultura, entre otros.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Cabezal	Trinocular	-
Ocular	WF10X/ø22	mm
Objetivos de Plano Infinito	4X, 10X, 40X(S) y 100X (S, Aceite)	-
Platina	Medidas: 175x145 Movimiento: X-Y 76x50	mm
Revolver	Cuádruple	-
Enfoque	Rango: 25	mm
Condensador	ABBE N.A.= 1.25	-
Iluminación	LED 5W Brillo ajustable	W
Alimentación	110/60	V/Hz

**CE**  
Conformidad  
Europea

**ISO**  
9001:2015



## Características

- Cabezal Trinocular Siedentopf inclinado a 30° para un enfoque de alta calidad.
- Se adapta a cabezales binoculares o trinoculares inclinados a 30°.
- Objetivos de plano infinito y oculares de campo amplio.
- Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope de seguridad.
- Revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra.
- Moderno brazo en arco para una mejor visualización, ergonomía y comodidad.
- Platina Mecánica de doble capa, con vernier y pinza para una operación fácil.
- Objetivos con anillos de color para su fácil identificación durante su operación.
- Iluminación Koehler LED 5W con brillo ajustable, luz eficiente y prolongada.
- Condensador ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris para una observación detallada.
- Conector que permite adaptar una Pantalla LCD de alta definición.
- Base robusta, diseñado para uso prolongado para distintas áreas de aplicación.

## Accesorios Incluidos

- Muestra de aceite de inmersión.
  - Juego de llaves Allen.
  - Funda.
  - Cable de alimentación (110V 60Hz).
- ¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!