



Centrífuga FUGE XVI

CDY101991



Garantía
3 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 - 15 000 rpm
FCR Máxima	20 600 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<55dB
Peso	52 kg
Potencia	500 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
621x450x360 mm



Rotores Compatibles*



24x1.5/2 ml
20 600 xg



12x15 ml
11 840 xg



6x50 ml
13 480 xg



Fusible



Cable de alimentación
(110V 60Hz)



Llave allen



Manual de Operación
en Español

Características

Ventana para validación de RPM*



Velocidad configurable en RPM y FCR



Sistema de seguridad de apertura



*No incluye tacómetro




Cerradura electrónica
con apertura automática



Rotor

Motor libre de
mantenimiento sin
escobillas de carbón.

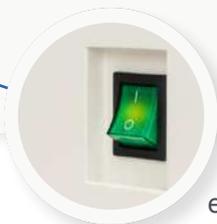

Botón de
encendido/apagado

Vista Frontal





Sostenga el rotor para que no gire y use la llave Allen para atornillar



Rotor de aluminio sólido con sellado hermético



Coloquelas de forma lo más simétrica posible



Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1^a. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070