




**Garantía  
2 años**

# Horno de Secado 125 litros

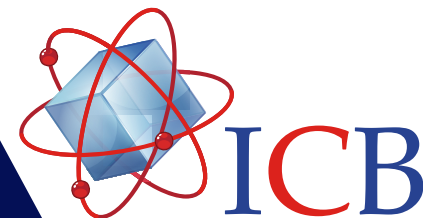

HSF102971

## Descripción

El Horno de Secado es un equipo que proporciona un control preciso de temperatura y un ambiente uniforme para procesos de desecación, calentamiento y esterilización de muestras y materiales por calor seco.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	125 litros
Temperatura	TA+10°C a 300°C
Estabilidad	±1°C
Temporizador	0 - 9999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	500x450x550 mm
Dimensiones externas	640x640x930 mm
Peso	60 kg
Potencia	2300 W
Alimentación	110V 60Hz



## Características

- Panel LED a color para la configuración de parámetros.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables en 11 niveles.
- Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Orificio de Ø35mm para la inserción de sondas de monitoreo.
- Sensor electrónico de temperatura PT100 en el interior.
- Ventilador de circulación de aire suave (convección forzada).
- Interruptor para activar o desactivar la convección forzada.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.

## Accesorios Incluidos

- 2 rejillas removibles y ajustables
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español