




**Garantía
2 años**

Incubadora de Laboratorio 65 Litros

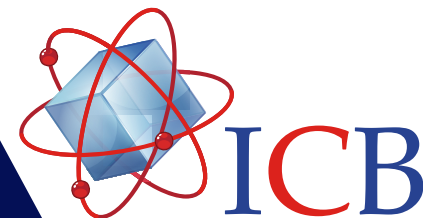

IDF109673 / 2^{da} Generación

Descripción

La incubadora de 65 litros para laboratorio es un equipo que proporciona un ambiente controlado para el cultivo de microorganismos y células, utilizando convección natural para calentar el aire y mantener una temperatura constante y homogénea.

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------|-----------------|
| Capacidad | 65 litros |
| Temperatura | TA+5°C a 70°C |
| Estabilidad | ±0.5°C |
| Temporizador | 0 - 9999 min |
| Operación | Continua/Tiempo |
| Dimensiones internas | 400x350x450 mm |
| Dimensiones externas | 575x480x720 mm |
| Peso | 32 kg |
| Potencia | 450 W |
| Alimentación | 110V 60Hz |



Características

- Pantalla LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.
- Puerta interior de cristal templado de 6mm con sello de goma.
- Puerta exterior de acero con sello de goma magnético.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables en 10 niveles.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Orificio de Ø35mm para la inserción de sondas de monitoreo.
- Sensor electrónico de temperatura PT100 en el interior.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Calentamiento por película electrotérmica de mica.
- Convección natural.

Accesorios Incluidos

- 2 rejillas removibles y ajustables
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español