




**Garantía  
2 años**

# Incubadora 45 litros

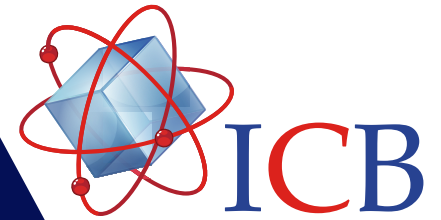

IDF109731

## Descripción

La incubadora de 45 litros para laboratorio es un equipo que proporciona un ambiente controlado para el cultivo de microorganismos y células, utilizando convección forzada y/o natural para calentar el aire y mantener una temperatura constante y homogénea.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	45 litros
Temperatura	TA+5°C a 120°C
Estabilidad	±1°C
Temporizador	0 - 9999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	350x350x350 mm
Dimensiones externas	500x550x735 mm
Peso	37 kg
Potencia	500 W
Alimentación	110V 60Hz



## Características

- Pantalla LCD a color para la configuración de parámetros.
- Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado. Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.
- Cuerpo exterior fabricado en acero laminado en frío y pintura electrostática.
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables en 6 niveles.
- Limitador de temperatura de alta precisión con control digital.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Sensor de temperatura interno para el control de la temperatura.
- Ventilador con 3 niveles de velocidad para el suministro de aire caliente
- Convección mecánica (forzada) y/o natural.

## Accesorios Incluidos

- 2 rejillas planas removibles y ajustables
- Fusible
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español