




**Garantía  
2 años**

# Incubadora con Agitación 50 litros

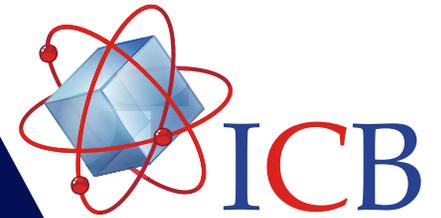

IAF110846

## Descripción

La incubadora con agitación combina el control de temperatura y movimiento oscilatorio, proporcionando una mezcla homogénea y una óptima temperatura para el cultivo de microorganismos, células y reactivos biológicos en condiciones óptimas.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	50 litros
Temperatura	TA+5°C a 65°C
Estabilidad	±0.1°C
Uniformidad	±1°C
Velocidad	30 - 300 rpm
Orbita	Ø 20 mm
Temporizador	0 - 9999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	455x380x290 mm
Dimensiones externas	500x640x480 mm
Peso	45 kg
Potencia	600 W
Alimentación	110V 60Hz



9001:2015 Conformidad  
13485:2016 Europea



## Características

- Panel LCD de 3" para la configuración de parámetros.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con acabado en espejo.
- Tapa transparente fabricada en resina importada.
- Foco de luz LED blanca para iluminar el interior.
- Esterilización del interior mediante lámpara UV a 253.7nm.
- Sensor electrónico de temperatura PT100 en el interior.
- Ventilador de circulación de aire suave (convección forzada).
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.

## Accesorios Incluidos

- Plataforma universal con resortes
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español