




**Garantía
2 años**

Incubadora Refrigerada 70 litros

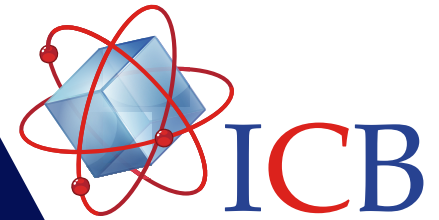

IRF111293

Descripción

La incubadora refrigerada para B.O.D. es un equipo de laboratorio con sistema de refrigeración y calefacción que mantiene una temperatura controlada, para análisis de demanda bioquímica de oxígeno, cultivos microbiológicos y estudios ambientales.

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------|--|
| Capacidad | 70 litros |
| Temperatura | 0°C a 65°C |
| Estabilidad | Alta Temp. $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Baja Temp. $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| Temporizador | 0 - 99.9 hrs |
| Operación | Continua/Tiempo |
| Dimensiones internas | 415x350x500 mm |
| Dimensiones externas | 571x591x1051 mm |
| Peso | 69 kg |
| Potencia | 800 W |
| Alimentación | 110V 60Hz |



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea



Características

- Pantalla LCD de 3" para la configuración de parámetros.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.
- Puerta interior de cristal templado de 6mm con sello de goma.
- Puerta exterior de acero con sello de goma magnético.
- Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.
- Lámpara de luz LED blanca de 5W para iluminar el interior.
- Orificio de $\varnothing 43\text{mm}$ para la inserción de sondas de monitoreo.
- Sensor de temperatura interno PT100.
- Ventilador de circulación de aire suave (convección forzada).
- Función inteligente de descongelación automática.
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Sistema de refrigeración libre de flúor con refrigerante R134a.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.

Accesorios Incluidos

- 2 rejillas removibles y ajustables
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español