




**Garantía  
1 año**

# Micropipeta Advanced Volumen Variable

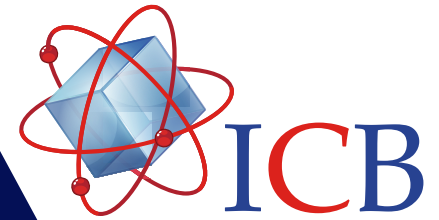

**CE**

Conformidad  
Europea



17025:2017



8655:2022



## Descripción

La Micropipeta Advanced monocal de volumen variable de ICB está diseñada con tecnologías patentadas que garantizan precisión y comodidad para los usuarios de laboratorio. Calibradas y certificadas acorde a las normas ISO

## Características

- Alta precisión con la tecnología  $\mu$ Air™ (patentada).
- Recalibración en laboratorio con tecnología UniCal™ (patentada).
- Perilla para fácil ajuste de volumen.
- Mecanismo especial de cambio de dígito y display a 4 dígitos.
- Se puede esterilizar 100% en autoclave.
- Evita la contaminación con su botón eyector de puntas.
- Código de color para identificar rápidamente el rango de volumen.

## Accesorios Incluidos

- Herramienta de calibración
- Muestra de punta
- Soporte de mesa
- Manual de Operación en Español
- Certificado de calibración

# Especificaciones Técnicas

Micropipetas de Volumen Variable	Modelo SKU	Rango de Volumen	Incremento	Exactitud		Precisión	
				+/-%	+/-µl	+/-%	+/-µl
	PVI109947	0.5-10 µl	0.01 µl	1	0.10	0.5	0.05
	PVI109971	10 - 100 µl	0.1 µl	0.6	0.60	0.2	0.20
	PVI109994	100-1000 µl	1 µl	0.6	6.00	0.2	2.00

## Reporte de calibración



ISO/IEC 17025:2017  
Certificate No.: CC-2795

Fecha de impresión: 19/09/2024  
ESTADO: APROBADO

### REPORTE DE CALIBRACIÓN

**DESCRIPCIÓN :** Micropipeta Monocanal 0.5-10 µl  
**ID DEL DISPOSITIVO :** 24310038  
**Identificación del método :** VV/0.5-10µl  
**ULR No. :** CC103224000277375F

**FECHA DE CALIBRACIÓN :** 19/09/2024 3:26 PM  
**IDENTIFICACIÓN DEL TERMINAL :** 69  
**Lugar:** Laboratorio ICB

#### FACTORES AMBIENTALES

**TEMP :** 25.00 °C **FACTORES Z :** 1.0040 mm<sup>3</sup>/mg **PRESIÓN BARÓRICA :** 100.00 KPa **HUMEDAD RELATIVA :** 60.00%

#### ESTADÍSTICA DE CALIBRACIÓN

Vol (µl)	No	Peso Wt (mg)	Vol (µl)	Prom. (µl)	SD (µl)	Error E%		Variación CV%		Estado
						Actual	Objetivo	Actual	Objetivo	
2.000	1	2.000	2.008	1.975	0.058	1.267	5.00	< 2.50	2.50	APROBADO
	2	4.000	2.008							
	3	5.900	1.908							
5.000	1	5.000	5.020	5.020	0.100	0.400	2.00	< 1.00	1.00	APROBADO
	2	10.100	5.120							
	3	15.000	4.920							
10.000	1	10.000	10.040	10.006	0.153	0.063	1.00	< 0.50	0.50	APROBADO
	2	20.100	10.140							
	3	29.900	9.839							

Encargado de C.C.

